


M I S E E N G A R D E :

Risque de mesure incorrecte de la glycémie

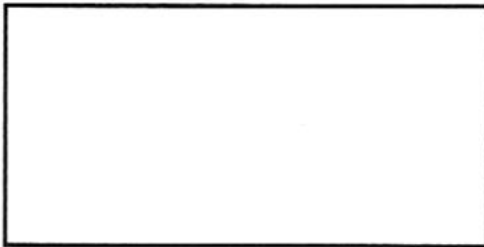

Utilisez **EXTRANEAL** (icodextrine 7,5 %),
solution pour dialyse péritonéale

Veillez utiliser **UNIQUEMENT** des glucomètres et des bandelettes de test spécifiques au glucose. Ces méthodes sont couramment utilisées dans les laboratoires cliniques. Contactez le fabricant des glucomètres et bandelettes de test pour déterminer la méthode utilisée.

N'utilisez pas des glucomètres ou des bandelettes de test qui utilisent l'enzyme de glucose-déshydrogénase-pyrroloquinoléine-quinone (GDH-PQQ) ou de glucose-dye-oxydoréductase. De plus, certains glucomètres ou bandelettes de test qui utilisent l'enzyme de glucose déshydrogénase avec flavine-adénine dinucléotide (GDH-FAD) ne doivent pas être utilisés. Ils peuvent entraîner la lecture faussement élevée de la glycémie auprès des patients utilisant **EXTRANEAL** (icodextrine 7,5%) et masquer une véritable hypoglycémie ou mener à un diagnostic erroné d'hyperglycémie, ce qui peut mettre la vie du patient en danger.

Consultez www.glucosesafety.com pour plus d'informations.

Novembre 2018

Baxter

BAXTER et EXTRANEAL sont des marques déposées de Baxter International Inc.